


SERIES 8000 RETRACTING BASE SLEDGE MICROTOME




BRIGHT

EXPERIENCED . DEDICATED . ACCOUNTABLE

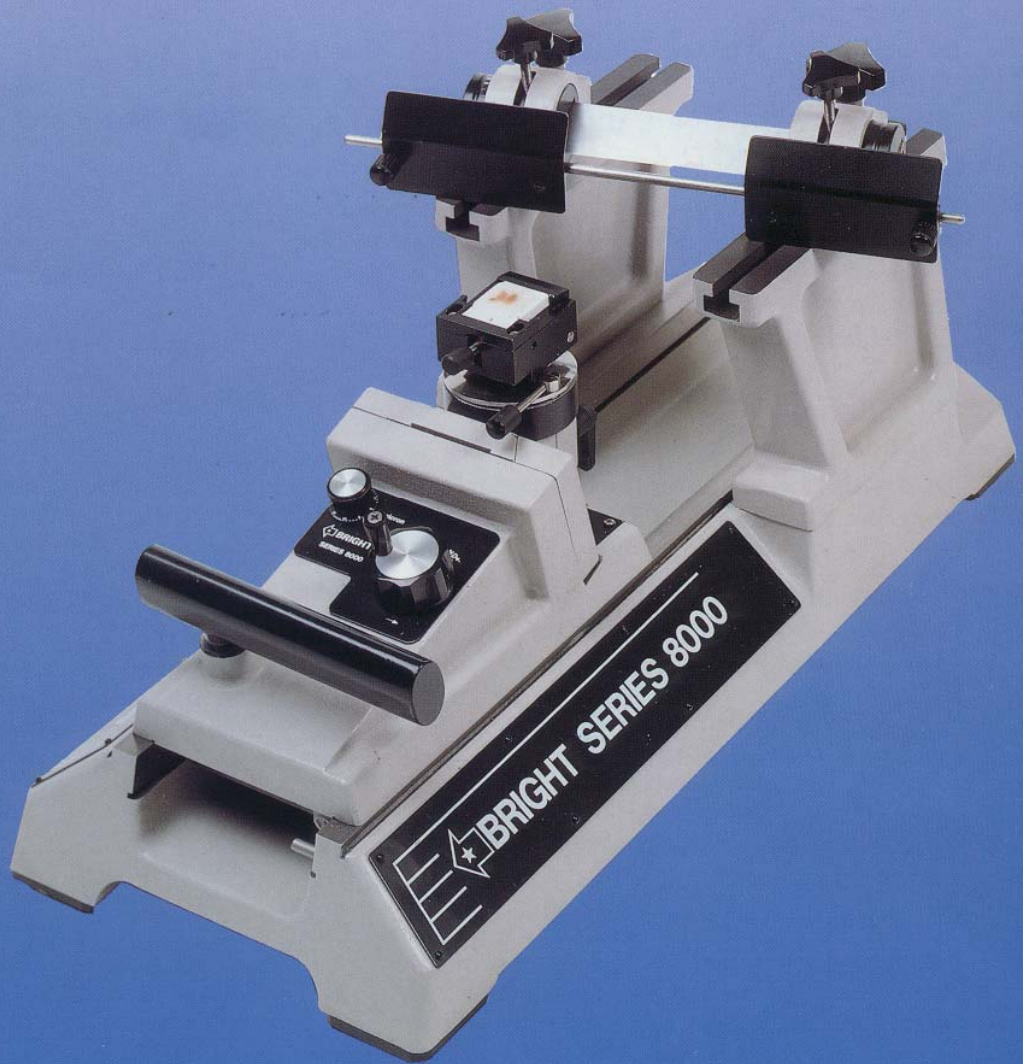

CERT. No. Q5456
BS5750 PART 2
(ISO 9002)

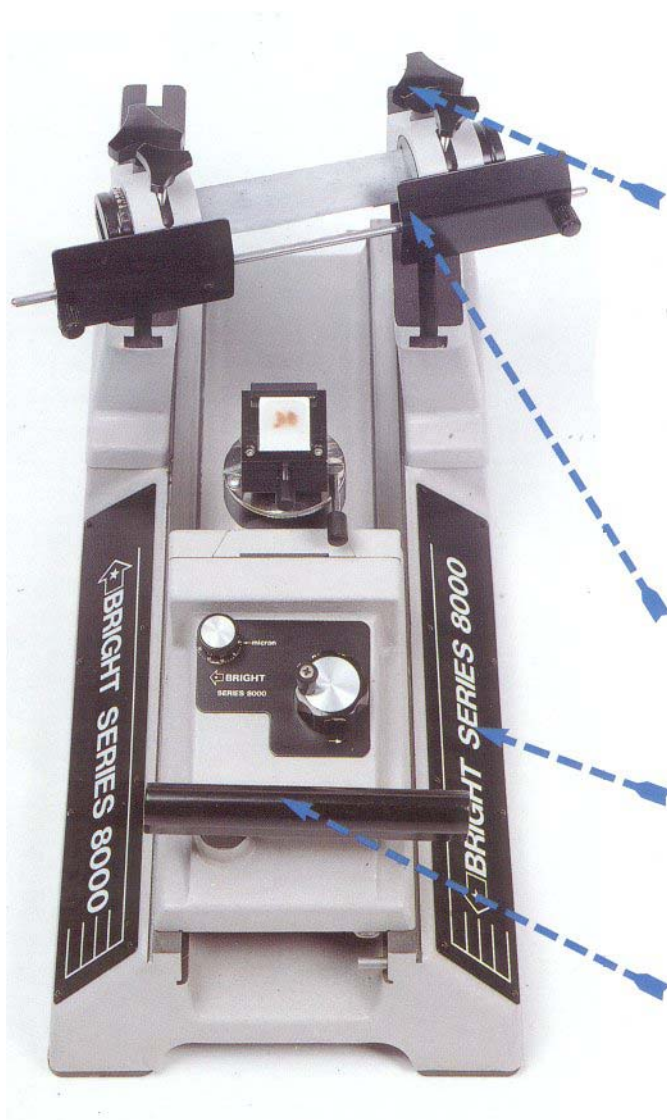

MICROTOMO DE DESLIZAMIENTO DE DOBLE GUÍA EN LA BASE Y RETRACCIÓN

Diseñado para satisfacer las necesidades del laboratorio de rutina de histología, pero con la versatilidad y los accesorios necesarios en otros departamentos y especialidades.

Soporte de cuchilla

Las torres de soporte de la cuchilla están diseñadas de tal forma que pueden montarse de forma opuesta al montaje original, consiguiendo mayor amplitud y así cortar objetos más grandes. En su posición normal pueden cortarse bloques hasta 110 mm de ancho, mientras que de forma opuesta pueden cortarse bloques hasta 170 mm. Los soportes de la cuchilla, mediante el ajuste de ángulo y el de deslizamiento, proporcionan de por sí suficiente rigidez a la cuchilla. De todas formas está disponible, como opcional, un soporte de doble perno de sujeción para aumentar la rigidez.

Protectores de cuchilla

Suministrados de serie, los protectores de cuchilla de amplitud total, proporcionan al usuario mayor seguridad frente a la total longitud de la cuchilla y no solamente en sus extremos.

Construcción

Construido en fundición y mecanizado de precisión, la base y el carro de deslizamiento están acabados con una pintura resistente a los solventes y detergentes del laboratorio.

Avance y retracción

El avance del objeto y la retracción se consiguen por la simple acción de empujar hacia delante y tirar hacia atrás el carro de deslizamiento mediante la empuñadura.

ESPECIFICACIONES

Avance de la muestra: De 0 a 40 micras en pasos de 1 micra

Máximo tamaño del objeto: 170 x 250 mm

Dimensiones: Largo 61 cm, Alto 32,5, Ancho 26 cm

Peso: 25 Kilos

Casa Alvarez

Mayor, 65 - 28013 MADRID - Tel.: 91 5481016
Padilla, 312, ent. 3ª - 08025 BARCELONA - Tel.: 93 4334400

aa@casaalvarez.com cabarna@casaalvarez.com
<http://www.casaalvarez.com>